



סט אביזרים למשאבת חלב Ameda

הוראות שימוש

סט אביזרים לשימוש עם משאבת חלב Ameda
האביזרים והמשאבה ישמשו לשאיבת חלב לאחר הלידה

הרכבת החלקים לאחר שנוקו ויובשו

- יש לשטוף את הידים היטב עם סבון ומים לפני שימוש באביזרים.
- להצמיד את השסתום לטבעת שבתחתית הקונוס
- להבריג את בקבוק החלב באזור ההברגה של הקונוס
- להכניס את הדיאפרגמה לארובה העליונה של הקונוס. להדק את "המכסה המתאם" על הדיאפרגמה עד ה"קליק".
- לשאיבה מצד אחד: במתאם הצנרת יש להקפיד לאטום את החיבור עבור הצנרת השנייה.
- לפני הפעלת המשאבה יש לחבר את מתאם הצנרת למשאבה (לפני הפעלת המשאבה יש לקרוא את הוראות השימוש במשאבה).

- (!) יש לשמור את כל האביזרים מחוץ להשג ידם של ילדים.
- (!) אין להכניס את האביזרים למיקרוגל.
- (!) יש לעיין בעלון ההוראות לפני השימוש.

הוראות שימוש לפני שימוש ראשוני

- הוראות הניקוי במים רותחים הינן עבור 6 אביזרים בלבד מסך האביזרים שקיימים בסט (קונוס, בקבוק, דיאפרגמה, שסתום, טבעת סגירה ודיסק סגירה). אין להרתיח צנרת, מתאם צינורות ואת מכסה הדיאפרגמה.
- יש להשרות את האביזרים למשך 20 דקות בתוך כלי עם מים שרתחו והוסרו מהכריים.
 - בתום 20 דקות, יש להוציא בזהירות את האביזרים מהמים ולהניחם לייבוש באויר. אין להרכיב ולהשתמש באביזרים עם המשאבה אלא אם כן הם יבשים לחלוטין.

הוראת ניקוי לפי כל שימוש


- הוראות הניקוי הינן עבור 6 אביזרים בלבד מכל האביזרים שקיימים בסט (קונוס, בקבוק, דיאפרגמה, שסתום, טבעת סגירה ודיסק סגירה).
- לאחר כל שימוש יש לשטוף את 6 האביזרים במי סבון חמים ולשטוף היטב עם מים חמים נקיים.

* את הקונוס והבקבוק ניתן לשטוף (במקום השטיפה שתוארה) במדיח הכלים, מגירה עליונה.

ערכה מק"ט 171051 הינה סטרילית ומוכנה לשימוש ללא ניקוי ראשוני | ערכה מק"ט 171341P, 171111P מחייבת ניקוי לפי הוראות הניקוי בשימוש ראשון.

חלקי המשאבה

- צנרת
- מתאם צינורות
- מכסה דיאפרגמה
- דיאפרגמה
- קונוס
- שסתום
- טבעת סגירה
- דיסק סגירה
- בקבוק

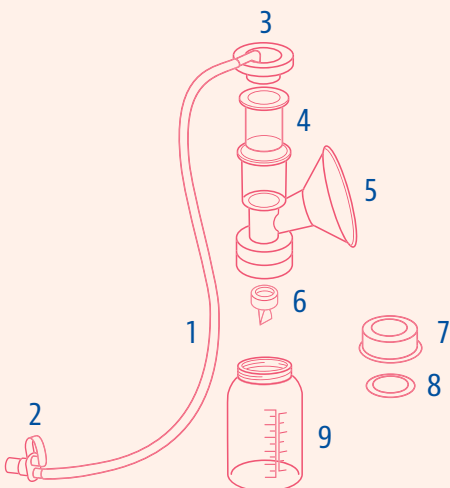

AME17134IP AME17111IP, AME17105I طقم توابع لشفاطة حليب Ameda

تعليمات الاستعمال
طقم توابع تُستخدم مع شفاطة حليب Almeda
تُستخدم الشفاطة وتوابعها لشطف الحليب بعد الولادة

تعليمات التنظيف قبل كل استعمال

تعليمات التنظيف بمياه مغلية تنطبق فقط على 6 توابع من مجموع التوابع الموجودة في الطقم (المخروط، القنينة، الغشاء، الصمام، حلقة الإغلاق وقرص الإغلاق). لا يجوز غلي الأنابيب وغطاء الغشاء.

1. يجب نقع التوابع لمدة 20 دقيقة داخل وعاء مملوء بالماء بعد غليه وإزالته عن الغاز.
2. بعد مرور 20 دقيقة يجب إخراج التوابع من الماء بحذر وتركها لتجف في الهواء. لا يجوز تركيب التوابع واستعمالها إلا إذا كانت جافة تماماً.

تعليمات التنظيف قبل كل استعمال

تعليمات التنظيف بمياه مغلية تنطبق فقط على 6 توابع من مجموع التوابع الموجودة في الطقم (المخروط، القنينة، الغشاء، الصمام، حلقة إغلاق، قرص إغلاق). بعد كل استعمال يجب غسل التوابع الأربعة (6) بالماء الساخن والصابون ومن ثم شطفها جيداً بمياه ساخنة نظيفة.

* يمكن غسل المخروط والقنينة في ماكينة جلي الأواني، في الدرج العلوي (بدل الغسيل بالطريقة المذكورة).

طقم رقم 117105 في الكatalog هو طقم معقم وجاهز للاستعمال دون حاجة للتنظيف الأولي | طقم رقم 17134IP, 17111IP يحتاج إلى تنظيف وفقاً لتعليمات التنظيف للاستعمال الأول.

تركيب القطع بعد تنظيفها وتجفيفها

1. يجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل استعمال التوابع.
2. يجب إلصاق الصمام بالحلقة الموجودة في قاع المخروط.
3. يجب تثبيت قنينة الحليب في منطقة اللولب على المخروط.
4. يجب إدخال الغشاء إلى مخرج المخروط العلوي. ومن ثم يجب شد "الغطاء المناسب" على الغشاء إلى أن يصدر صوت "كليك".
5. للشفط من جهة واحدة: في وصلة الأنبوب يجب الحرص على سد الوصلة للأنبوب الثاني.
6. قبل تشغيل الشفاطة يجب ربط وصلة الأنابيب بالشفاطة (يجب قراءة تعليمات استعمال الشفاطة قبل استعمالها).

- (!) يجب حفظ جميع التوابع بعيداً عن متناول الأطفال.
(!) لا يجوز إدخال التوابع إلى جهاز الميكروجال.
(!) يجب مراجعة نشرة التعليمات قبل الاستعمال.

AME17134IP AME17111IP, AME17105I Набор принадлежностей для молокоотсоса Ameda Инструкция пользователя

Набор принадлежностей для использования с молокоотсосом Ameda Молокоотсос и аксессуары к нему используются для откачивания молока после родов

Подготовка принадлежностей перед первым использованием

Очистка в кипящей воде применима только к 6 принадлежностям находящимся в наборе. Залейте водой принадлежности, входящие в набор (конус, бутылочку, диафрагму для молокоотсоса). Нельзя кипятить трубку, коннектор и крышку прокладки.

1. Оставьте принадлежности на 20 минут в посуде с кипящей водой и снимите ее с конфорки.
2. Через 20 мин осторожно извлеките принадлежности из воды и разложите их для просушивания на воздухе. Собирать принадлежности и использовать их с молокоотсосом разрешается только в полностью сухом состоянии.

ОЧИСТКА ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Очистка применяется только к 6 принадлежностям из всего набора (конус, бутылочка, диафрагма, клапан).

После каждого использования необходимо промыть эти 6 принадлежностей горячей мыльной водой и тщательно ополоснуть горячей чистой водой.

* Конус и бутылочку можно вымыть в верхнем ящике посудомоечной машины (вместо очистки, описанной выше).

Набор с каталожным номером 17105I является стерильным и готов к использованию без предварительной очистки | Набор с каталожным номером 17134IP, 7111IP подлежит очистке в соответствии с инструкциями по очистке перед первым использованием.

Сборка набора после очистки и просушивания

1. Тщательно вымойте руки мылом и водой перед использованием принадлежностей.
2. Вставьте и закрепите клапан в отверстии в нижней части конуса.
3. Прикрутите бутылочку для сбора молока к верхней резьбе конуса.
4. Вставьте диафрагму в резьбу в верхней части конуса. Затяните закручивающуюся крышку на диафрагме до щелчка.
5. Для одностороннего всасывания заблокируйте соединение с второй трубкой с помощью коннектора.
6. Перед запуском молокоотсоса подключите коннектор к молокоотсосу (перед приведением в действие молокоотсоса прочитайте инструкции по использованию молокоотсоса.)

(!) Храните принадлежности в недоступном для детей месте.

(!) Нагревание принадлежностей в микроволновой печи запрещено.

(!) Прочитайте вкладыш с инструкцией по использованию перед началом применения.



أجزاء الشفاطة

1. أنابيب
2. وصلة أنابيب
3. غطاء الغشاء
4. غشاء
5. مخروط
6. صمام
7. حلقة إغلاق
8. قرص إغلاق
9. قنينة

Детали молокоотсоса

1. Трубка
2. Коннектор
3. Крышка диафрагмы
4. Диафрагма
5. Конус
6. Клапан
7. Закручивающаяся крышка
8. Заглушка для бутылочки
9. Бутылочка