




משאבת חלב AMEDA פלטינום

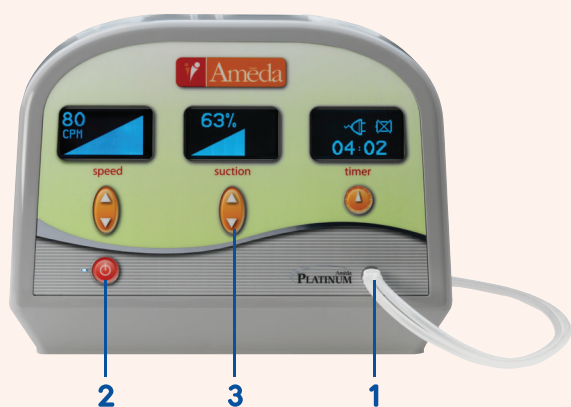

1. חיבור ערכת שאיבה חברי את הקונוס לחזה ואת קצה הצינור למשאבה.
2. הדלקת המשאבה לחצי על הכפתור האדום בתחתית המשאבה.
3. כיוון עוצמת השאיבה בכפתור האמצעי לחצי על החץ והתחילי בעוצמה הנמוכה ביותר. העלי בהדרגה את העוצמה, כאשר מורגשת אי נוחות יש לרדת מעט בעוצמת השאיבה.
4. כאשר מחליפים בין שד לשד, יש להפסיק את עבודת המשאבה.

OMG I'm Branding



UNA

משאבה חשמלית
חד צדדית ביתית

להשיג בכל בתי מרקחת
הפרטיים או בבתי המרקחת



משאבה ידנית ביתית

להשיג בכל בתי מרקחת
הפרטיים או בבתי המרקחת



Platinum

משאבה חשמלית דו צדדית

להשיג בכל בתי מרקחת
הפרטיים או בבתי המרקחת



Lactaline


משאבה חשמלית דו/חד
צדדית ביתית

להשיג בכל בתי מרקחת
הפרטיים או בבתי המרקחת



Инструкции по эксплуатации Молокоотсоса “Платинум”

- Сборка набора молокоотсоса**
молокоотсоса Соедините накладку для груди и конец трубки молокоотсоса.
- Приведение в действие молокоотсоса**
Нажмите на красную кнопку на основании молокоотсоса.
- Управление мощностью всасывания**
Нажмите на стрелку на средней кнопке и начните на самой низкой мощности. Постепенно увеличивайте мощность, но при ощущении дискомфорта необходимо немного снизить мощность молокоотсоса.
- При смене груди необходимо остановить работу молокоотсоса.**

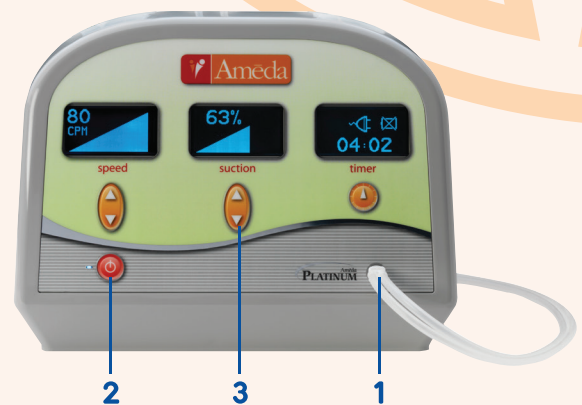

UNA
Односторонний
электрический
молокоотсос
для домашнего
пользования

Доступен в частных
аптеках и аптеках



Ручной
молокоотсос
для домашнего
использования

Можно приобрести
через интернет (с
доставкой на дом)
или в любой аптеке



**Одно/
двухсторонний**
молокоотсос для
использования в
больнице

Для использования
в отделениях
интенсивной терапии
для недоношенных
и новорожденных
детей в больницах




**Одно/
двухсторонний**
электрический
молокоотсос
для домашнего
использования

Можно приобрести
через интернет (с
доставкой на дом)
или в любой аптеке



Отдел по обслуживанию клиентов Дин Диагностика 1-800-333-636 | Урус 052-7715419
Copyrighted materials of Ameda, Inc. are used with permission

تعليمات تشغيل شفاطة الحليب بلا تينوم

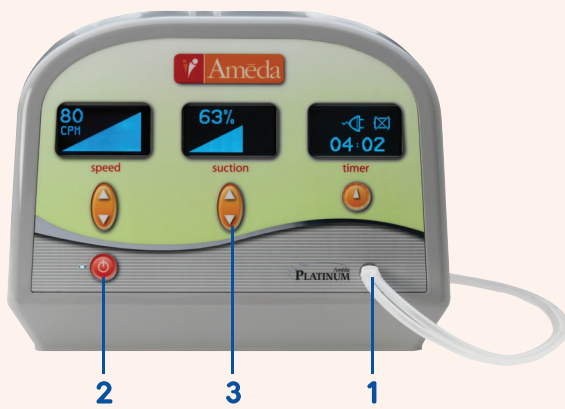

1. لوصول طقم الشفط أو وصلي المخروط بالصدر
وطرف الأنبوب بالشفّاطة.

2. لتشغيل الشفّاطة اضغطي على الزر الأحمر
في قاع الشفّاطة.

3. لضبط قوة الشفط اضغطي على السهم في الزر
الأوسط وابدئي بأقل درجة قوة. ارفعي القوة
تدريجياً، وحين تشعرين بانزعاج، خففي قوة
الشفط قليلاً.

4. حين تنتقلين من ثدي لآخر يجب إيقاف الشفّاطة
عن العمل.



UNA

شفّاطة حليب منزلية
لجهة واحدة

متوفرة في جميع
الصيدليات الخصوصية
والعمومية



شفّاطة حليب
يدوية للاستخدام
المنزلي

متوفرة في الصيدليات
الخاصة أو في باقي
الصيدليات



بلا تينوم

شفّاطة حليب جهة
واحدة / جهتين

متوفرة في قسم العناية
المكثفة وقسم الخدج
وقسم المواليد الجدد
في مستشفى رامبام



لاكتالين

شفّاطة حليب كهربائية
جهة واحدة / جهتين
للاستخدام المنزلي

متوفرة في جميع
الصيدليات الخاصة أو في
باقي الصيدليات



التشخيص خدمة العملاء 1-800-333-636 القانون | إيريس 052-7715419

Copyrighted materials of Ameda, Inc. are used with permission

