


FourcePoint™

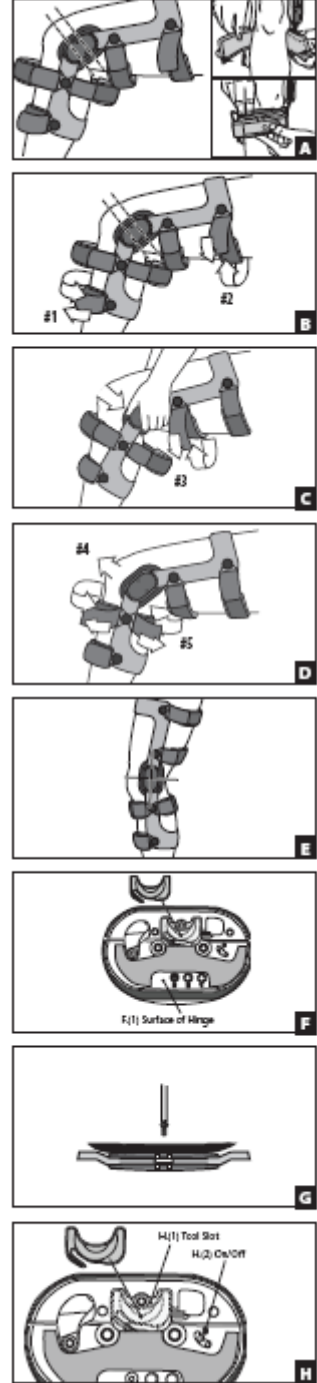

دعامة رفع بأربع نقاط مع تكنولوجيا المفصلة Fourcepoint
قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

دلائل الاستعمال: خلل بالرباط التصالبي الأمامي (ACL) • إعادة بناء الرباط التصالبي الأمامي • حالات العجز في الرباط الصليبي الجانبي • إصابة فرط التمديد • للوقاية • موانع الاستعمال: لا يوجد.

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للالام المذكورة أعلاه. يجب تحديد تكرار ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. للاستخدام على مريض قد حقق تمديدًا كاملاً.

(A)

1: بينما أنت جالس على حافة كرسي، أدخل رجلك للدعامة.

قم بثني الركبة بزواوية 45 درجة، ضع الدعامة كما هو مبين في الشكل A، بحيث تكون المفصلة في المركز بأعلى الرضفة (عظم رأس الركبة) بحيث تتجاوز قليلاً الخط الناصف من الساق. تحقق من أن المشد غير ملتوي حول الساق.

2: أغلق بإحكام حزام المحيط الكامل (شريط مضاد للنزوح) حول الجزء العلوي من بطة الساق الموجود ضمن الحزام رقم 4. انتظر الحزام رقم 4 حتى الخطوة D.

(B) ثبت حزام بطة الساق السفلي (الحزام رقم 1#)، ثم حزام الفخذ العلوي (الحزام رقم 2#).

(C) 1: من خلال الحفاظ على الركبة مثنية بزواوية 45 درجة، ادفع للفتين أي النهاية المستديرة للعظمة (مفصلات) نحو الجزء الخلفي من الساق، كما هو مبين في الشكل C.

2: مع الحفاظ على موقع المفصلات، أغلق بإحكام حزام الفخذ الأسفل (رقم 3).

(D) 1: اسحب المفصلات إلى الأمام قليلاً قبل ربط حزام قصبية الساق الأمامية (الطنبوب) (رقم 4). لا تسحب المفصلات بعد الخط المنصف للساق

2: بعد ذلك، اربط بإحكام حزام بطة الساق العلوي (رقم 5). لا تتبالغ في شد الأحزمة.

(E) 1: بعد أن يكتمل ربط الأحزمة، يجب أن تكون المفصلة في المركز فوق الجزء العلوي من الرضفة (عظم رأس الركبة) وخلف الخط الناصف بالساق بقليل.

2: لضمان عدم حدوث أي نزوح خلال النشاط، يوصى بثني الركبة عدة مرات أو المشي لبضع دقائق.

بعد ذلك شد الأحزمة ثانية واتبع الخطوات التالية A-D من أجل توافق محكم ومريح.

تعليمات تعديل المفصلة

براعي تعديل المقاومة (الشكل F)

اخلع الدعامة، أخرج رفائد اللقمة، أخرج المفتاح من داخل المفصلة، أخرج برغي التعديل. أدخل برغي التعديل ثانية إلى الموقع المطلوب وفقاً لراحة المريض وبروتوكول إعادة التأهيل الذي وضعه الطبيب (1-منخفض، 2-متوسط، 3-مرتفع). ادفع برغي التعديل للأسفل حتى تلامس أسنان اللولب سطح المفصلة (F1) لف مفتاح أن لشد التعديل حتى يصبح رأس البرغي مستويًا مع سطح المفصلة (F1). لا تشد الحزام أكثر مما يجب. كرر العملية للمفصلة الأخرى. يجب أن تكون المفصلتان بنفس الوضعية.

تغيير نهايات الثني الخارجي المعيارية (الشكل G)

أخرج البرغي كلياً. انزع التوقف وأدخل التوقف الجديد.

ضعه بصف مع الثقب في لوحة المفصلة، أدخل البرغي ثانية، وشده.

كرر العملية للمفصلة الأخرى. ينبغي أن تكون للمفصلتين نفس النهاية.

شغل المقاومة وأوقفها. (الشكل H)

أخرج الأداة من داخل غطاء المفصلة (H1). ضع الدعامة بحالة انثناء، أدخل الأداة لداخل فتحة التشغيل/الإيقاف (H2)، وحركها. "O" يعني أن الدعامة بحالة "إيقاف" أو أنها بدون مقاومة. عندما تبتعد عن "O" فالدعامة بحالة "تشغيل" أو لديها مقاومة. حالما يتم تعديل المفصلتين، أرجع الأداة للفتحة. ملاحظة: تباع عدة نهايات التمديد بالدرجات 0، 20°، 30°، 40°، 0° بمشکل منفصل. نهايات التمديد 10° مركبة.

الاستعمال والعناية

- المنتج معد لاستخدام مريض واحد فقط.
 - إذا كان من الضروري إعادة الربط أثناء النشاط، أعد ربط جميع الأحزمة متبعًا الخطوات في تعليمات الاستعمال.
 - قد يتم تشذيب جميع الأحزمة وسنادات التثبيت لتلائم مع الفروق الفردية في محيط الأطراف.
 - قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام في النشاطات المائية، جففه كلياً واشطفه بماء نظيف وماء عذب و ثم جففه في الهواء.
 - اغسل بطانات وسنادات تثبيت اللقمة الخاصة بك يوميًا في ماء بارد مع مطهر لطيف. يجفف في الهواء فقط، لا تسخن البطانات أو سنادات تثبيت اللقمة الجافة.
 - تفقد براغي العلاقة للربط وإعادة الشد حسب الحاجة بشكل متكرر.
 - قم بتزييت المفصلات بشكل دوري بواسطة مادة تزييت جافة أو بخاخ تفلون TM. لتزييت آلية المفصلة الداخلية، ضع الدعامة بحالة انثناء ورش لداخل الجزء الخلفي من غطاء المفصلة.
 - هذا الجهاز غير معد للاستخدام مع أجهزة أخرى باستثناء تلك المسجلة على وجه الخصوص كملحقات لهذا الجهاز.
- استشر طبيبك أو المعالج دائمًا قبل إجراء تغييرات بالدعامة.

لاستخدام مريض واحد فقط.

منتج Rx

كفالة: ستقوم DJO, LLC بتصليح أو استبدال كل المنتج أو جزء منه وكذلك ملحقاته بسبب عيوب بالمادة أو بعودة العمل لمدة ستة أشهر للمنسوجات وسنة واحدة لهيكل الدعامة/للمفصلات من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الشامل الذي يقدمه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.